

Wie Sie Ihre Medtronic 780 G Daten hochladen



Sie haben 2 Optionen, um Ihrer Daten von der Medtronic Pumpe hochzuladen: MiniMed Mobile App oder mit dem Blue Adapter.

I. Daten-Upload mit MiniMed Mobile App

1. Öffnen Sie den App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) und installieren Sie die App „**MiniMed™ Mobile**“
2. Starten Sie die App und gehen Sie durch die ersten Informationsseiten mit „*Weiter / Next*“
3. Falls Ihre Pumpe keine **Smart-Device-Konnektivität** besitzt (durch ein Symbol auf der Pumpe gekennzeichnet), können Sie die App nicht nutzen. In diesem Fall folgen Sie bitte den Anweisungen unter Punkt II.
4. Wenn Sie bereits ein CareLink™-Konto haben: Loggen Sie sich mit Ihren Log-in Daten ein
5. Falls Sie kein Konto haben, erstellen Sie ein neues Konto
6. Verbinden Sie Ihre Pumpe mit der App und wählen Sie Ihr Pumpenmodell aus
7. Die App setzt Ihre Pumpe in den **Pairing-Modus**
8. Bestätigen Sie die Bluetooth-Anfrage, indem Sie auf „**Pair**“ klicken.
9. Warten Sie, bis „Pairing successful /gekoppelt“ angezeigt wird, und tippen Sie dann „**Weiter** (Next)“
10. Bestätigen Sie Warnhinweise über die Funktion der App
11. Wenn die App nach Berechtigungen fragt, aktivieren Sie diese bitte.


II. Daten-Upload mit Blue Adapter

1. Installieren Sie zuerst die **CareLink-Uploader-Software** auf Ihrem Computer.
2. Öffnen Sie die Software und klicken Sie auf „**Jetzt hochladen** (Upload Now)“, um Ihr Gerät zu verbinden.
3. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, wählen Sie „**Gerät hinzufügen** (Add Device)“.
4. Wählen Sie Ihr Gerät aus – das Programm sucht dann automatisch nach dem blauen Adapter.
5. Stecken Sie den blauen Adapter in einen freien USB-Anschluss, wenn die Software Sie dazu auffordert.

6. Wenn der Adapter gefunden wurde, klicken Sie auf „**Weiter** (Next)“. Wird er nicht erkannt, ziehen Sie ihn kurz heraus, stecken Sie ihn wieder ein und wählen Sie „**Erneut versuchen** (Try Again)“.
7. Wählen Sie den Zeitraum Ihrer letzten Menstruation aus und klicken Sie auf „**Weiter** (Next)“.
8. Drücken Sie an der Pumpe die Abwärtstaste (↓), bis das Menü „CareLink“ erscheint.
9. Geben Sie den Code, der auf der Pumpe angezeigt wird, in die CareLink-Uploader-Software ein und klicken Sie auf „**Next**“.
10. Wählen Sie auf der Pumpe „**Upload Now**“, um den Datenupload zu starten.
11. Auf Ihrem Computer sehen Sie nun einen Fortschrittsbalken in der CareLink-Software und auf Ihrer Pumpe erscheint ein sich drehendes Symbol (Sync). Wenn beides angezeigt wird, läuft der Datentransfer erfolgreich.

III. Datenexport

1. Loggen Sie sich in Ihr Konto bei CareLink ein.
2. Wählen Sie dort den Reiter **Berichte**.

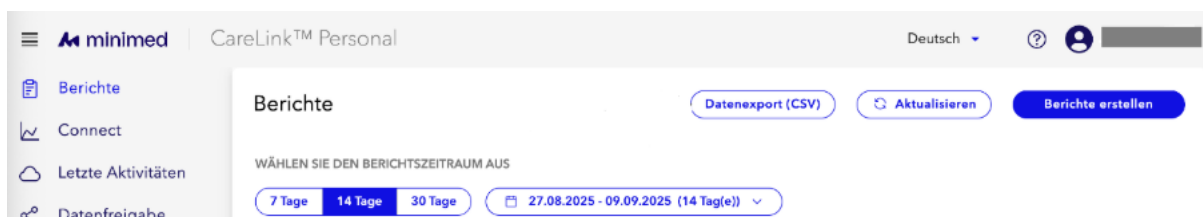

3. Klicken Sie auf **Datenexport (CSV)**, unten rechts
4. Wählen Sie den Datumsbereich aus (Dauer Ihrer letzten Menstruationsperiode) und laden Sie die CSV-Datei herunter.
5. Laden Sie die Datei über den von uns bereitgestellten sicheren Link hoch.